

<http://www.unisis.co.jp>

ディスポーザブル バイトブロック




実用新案登録番号 第3168827号
意匠登録番号 第1422824号
第1422825号

ディスポーザブル バイトブロック Disposable Bite Block

ディスポーザブル バイトブロックを装着することにより、気管内挿管チューブの閉塞や損傷を防ぎ患者の口腔内の安全を容易に得ることができます。固定しやすさと口腔内の圧迫を低減することを最大の目的として設計されているため、安全性に優れ口腔内損傷の防止や患者の肉体的および精神的負担を軽減することで高い評価を得ています。

特徴

バイトブロック：固定時のイメージ

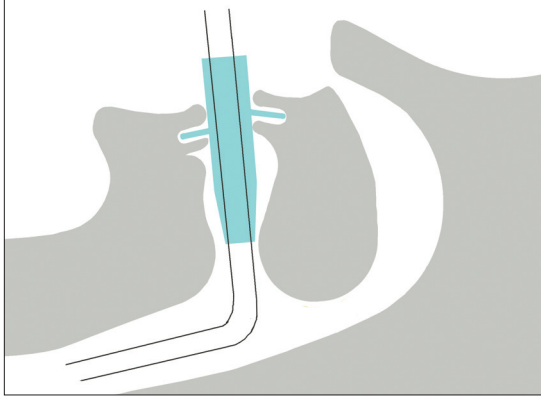


上下フランジの配置

上顎前歯と下顎前歯の噛み合わせのずれに合わせフランジ（ツバ）を配置させており固定しやすさと口腔内の圧迫を低減することを最大の目的として設計されているため、安定性に大変優れています。

上下フランジの角度

上顎前歯と下顎前歯の傾きに合わせフランジ（ツバ）を傾けています。長時間に及びバイトブロックの使用の際でも患者の口腔内損傷を防ぎ、感染を予防し患者の肉体的および精神的負担を軽減する役割を果たしています。

他社製品：固定時のイメージ

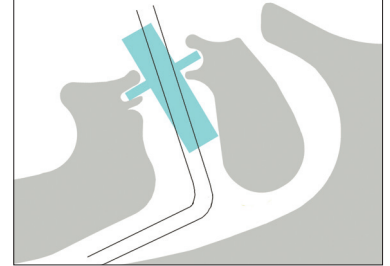


固定時上顎前歯と下顎前歯のフランジ（ツバ）が同一平面にある場合のバイトブロック固定時のイメージ。

製品

バイトブロック（シリコン）L・S

シリコンゴム製 EOG 滅菌

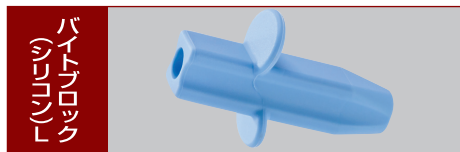


サイズ L	15.5×15.5×62mm	フランジの厚み	3mm
品番	51810700	入数	50個



サイズ S	12.0×12.0×52mm	フランジの厚み	2.5mm
品番	51812700	入数	20個

バイトブロック（ポリエチレン）

ポリエチレン製 EOG 滅菌

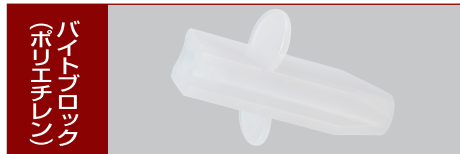

サイズ L	15.5×15.5×62mm	フランジの厚み	2mm
品番	51811700	入数	50個



本製品使用上の注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- バイトブロックは一人患者用です。
- 本品は潰瘍等の低減を保證するものではありません。
- 本品は医療機器との併用による補助的な製品であり生命維持を目的とした製品ではありません。
- 本品は医療機器との併用による補助的な製品でありチューブ固定、チューブ保護の確実性を保證するものではありません。
- 専門の医師がご使用ください。
- 異常が早期に発見できるよう常に監視してください。
- バイトブロック表面に損傷等異常が認められる場合は直ちに新しいものと交換してください。
- パッケージや本体に破れ、破損等異常が認められる場合には使用しないでください。
- 挿管に関しては院内のプロトコールに従ってください。
- 雑菌の増殖が考えられますので院内の手順に従って定期的な交換してください。
- 再使用禁止（本品はディスポーザブル製品です）
- 使用に際しては適切なサイズを選択してください。
- しっかりと固定してご使用ください。



安全に関するご注意

ご使用の際は、製品に添付されている取扱説明書の「警告・注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。高温、多湿、水、ほこり、腐食性ガスの多い場所に設置しないでください。

お問合せ先



株式会社 **ユニシス**

〒110-0016 東京都台東区台東 4-11-4 三井住友銀行 御徒町ビル7F
Tel: 03-5812-7768(国内営業部直通) Fax: 03-5812-7769

ユニシスウェブサイト <http://www.unisis.co.jp>

【製造販売元】株式会社 **ユニシス** 埼玉工場 【開発元】株式会社キュアケア

取扱店

※本カタログの仕様・形状は、製品改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

AP110307J