



<http://www.unisis.co.jp>

UNIEVER[®]

Uniever is a brand name of Unisis Corp.

ディスポーザブル低侵襲マイクロ注射針 (3本針) DISPOSABLE ATRAUMATIC MICRONEEDLE (TRIPLE TIP TYPE)



ディスプレイブル低侵襲マイクロ注射針 (3本針)

シンボルマーク



痛みが少なく、簡便に穿刺が可能な低侵襲マイクロ注射針


3本の極細針で構成されているマイクロ注射針は、施術者のスキルによるバラつきを防ぎ、安全に穿刺をすることが可能です。

特徴

3本針のメリット

低侵襲マイクロ注射針は3本の極細針を正面から見て円周上に等間隔で配列しているため、注入する薬液を広範囲に拡散することができ、穿刺回数を減らすことが可能です。また、3本の極細針が全て外側に向いているため、注入された薬液は一度中央に集まり広がっていきます。広範囲に安定した注入がされるため、薬液が効率的に作用することが可能です。

また、垂直穿刺が可能で、施術者による穿刺深度のバラつきを防ぐことができます。

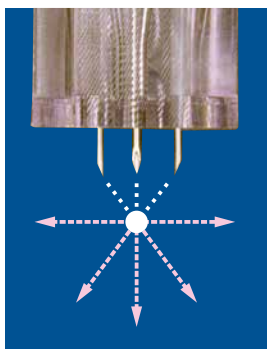


薬液の広がり

	断面積	断面積比率
マイクロ注射針 1本針34Gの断面積	0.00785mm ²	1
マイクロ注射針 3本針34Gの断面積	0.02355mm ²	3
マイクロ注射針 3本針31Gの断面積	0.06028mm ²	7.7


流動抵抗値の低減

低侵襲マイクロ注射針は3本の極細針で構成されているため、1本の注射針に比べて薬液を注入する際の抵抗値（流動抵抗値）が低くなります。粘度が高い薬液を投与する場合でも、つまりを起こすことなく、施術者の負担を低減して、施術者のスムーズな穿刺が可能となり、患者に対するQOLを向上することが可能です。

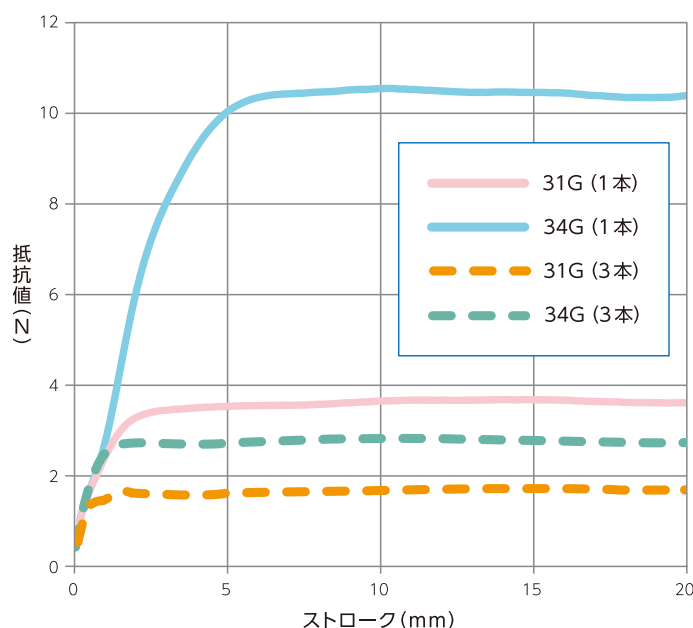

※精製水、試験速度 200mm/min で、シリンジより注入して測定。
※上記値は測定値であり、保証値ではありません。

各部名称および略図

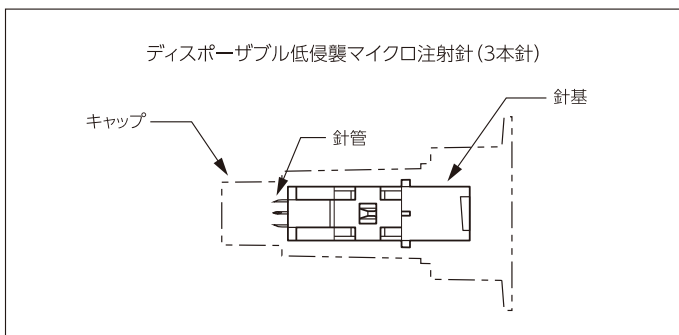

標準提供サイズ

ゲージ	長さ (mm)	品目コード
31G	1.5	4520760
	2.5	4520860
	3.5	4520960
34G	1.5	4521060
	2.5	4521160
	3.5	4521260

・包装単位: 10本/箱
・販売名: UNIEVER注射針I
・ガンマ線滅菌済

薬事認証番号 224AMBZX00007000

お問合せ先



〒110-0016 東京都台東区台東 4-11-4 三井住友銀行御徒町ビル7階
国内営業部 TEL.03-5812-7768 FAX.03-5812-7769

ユニシスウェブサイト >>> <http://www.unisis.co.jp>

〔製造販売元〕株式会社 **ユニシス** 埼玉工場

取扱店

※本カタログの仕様・形状は、製品改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

MN180101J